



BOWIE & DICK BOWIE & DICK

Il pacco monouso BOWIE&DICK è studiato per effettuare il test di Bowie&Dick, ossia per controllare la corretta rimozione dell'aria dall'interno dei carichi porosi negli sterilizzatori definiti "ad alto vuoto per carichi porosi" operanti con cicli sub-atmosferici o trans-atmosferici. E' utilizzabile per il monitoraggio giornaliero delle autoclavi a vapore con pre-vuoto operanti a 134° C - 137° C per 3-3,5 min e 121° C per 15 min.

Disposable pack BOWIE&DICK is designed to carry out the Bowie & Dick test, check the correct removal of air from the inside of the porous loads in defined sterilizers "to high vacuum for porous loads" operating with sub-atmospheric cycles or trans-atmospheric. It is used for the daily monitoring of steam autoclave with pre vacuum operating at 134° C - 137° C for 3-3,5 min. and 121°C for 15 min.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

Conforme alle norme ISO 11140-3 ; 11140-1; 11140-4 Classe 2+4 Conforming to norms 11140-3 ; 11140-1 ; 11140-4 Class 2+4



CONFEZIONAMENTO PACKAGING

96 pz per scatola 96 pcs | carton



PERSONALIZZABILE CUSTOMIZABLE

In base alla richiesta del cliente
According to the customer's request

BOWIE & DICK PRO BOWIE & DICK PRO

Il pacco monouso Bowie&Dick PRO è progettato per eseguire il test di Bowie&Dick, utile a verificare la corretta rimozione dell'aria e la penetrazione del vapore all'interno dei carichi porosi.


Vantaggi del Bowie&Dick PRO:

- Inchiostro ecologico privo di piombo
- Finestra di lettura chiara e facilmente interpretabile
- Design leggero e di semplice apertura
- Retro adesivo per una pratica registrazione e archiviazione

The Bowie&Dick PRO single-use test pack is designed to perform the Bowie-Dick test, used to verify the proper air removal and steam penetration inside porous loads.

Advantages of Bowie&Dick PRO:

- Lead-free, eco-friendly ink
- Easy-to-read result window
- Lightweight design and easy opening
- Self-adhesive back for convenient recording and archiving

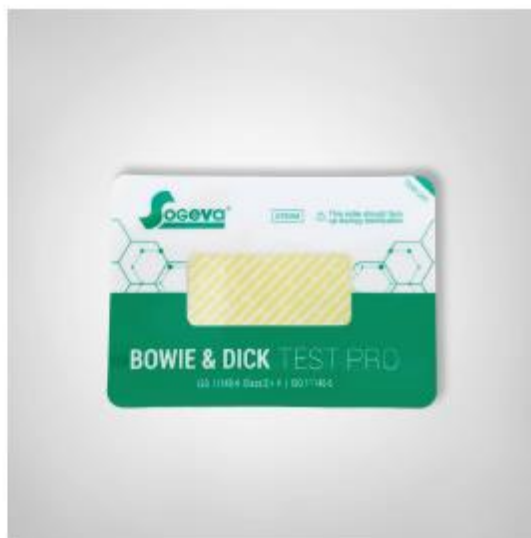

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

Conforme alle norme ISO 11140-3 ; 11140-1; 11140-4 Classe 2 Conforming to norms 11140-3 ; 11140-1 ; 11140-4 Class 2



CONFEZIONAMENTO PACKAGING

20 pz per scatola 20 pcs | box



PERSONALIZZABILE CUSTOMIZABLE

In base alla richiesta del cliente
According to the customer's request



HELIX TEST

HELIX TEST

Il test PCD di Helix viene utilizzato come test giornaliero per autoclavi ospedaliere pre-vuoto e per sterilizzatori a vapore classe B per la penetrazione del vapore e dei gas inerti. Il test PCD Helix è un test eccellente per rilevare anche le più piccole quantità di gas inerti e capacità di penetrazione del vapore. Viene fornito in un KIT con 1 tubo lungo 1.5 metri, 250 indicatori di sterilizzazione e 1 pinzetta per estrazione test.

Helix PCD Test is used as a daily test for pre-vacuum hospital sterilizers and for bench top steam sterilizers Class B for steam penetration and inert gases. The Helix PCD test is an excellent test to detect even the smallest amounts of inert gases and steam penetration capabilities. Supplied in a KIT with 1 tube 1.5 m long, 250 sterilization indicators and 1 extraction forceps for test.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

Conforme alle norme ISO 11140-1
Conforming to norm ISO 11140-1



CONFEZIONAMENTO PACKAGING

Confezione singola Single pack

INDICATORE PER LA STERILIZZAZIONE A VAPORE CLASSE 4

STEAM INDICATOR STRIPS TYPE 4

Gli indicatori per il processo di sterilizzazione a vapore classe 4 sono stati progettati per essere usati in autoclave a vapore che opera a 134 gradi per 3.5 minuti. La striscetta può essere utilizzata in ogni pacco e assicura la corretta penetrazione del vapore all'interno del pacco. L'indicatore chimico è a base acqua ed atossico. Le striscette Sogeva possono essere divise in due pezzi separati.

Class 4 Steam Indicator Strips Class 4 Steam indicator strips are designed to be used in steam sterilizers operating at 134°C -3.5 minutes. The indicator strips can be used in every pack and will provide assurance of steam penetration into the packs. The Sogeva indicator strips can be divided into two separate pieces for economical use.




CONFEZIONAMENTO PACKAGING

250 striscette in una confezione
250 strips in one box



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

ISO 11140-1 type 4

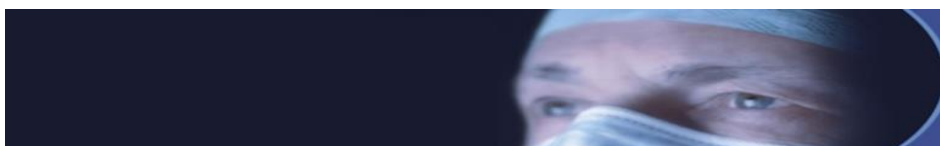

SOGEVAPOR **INTEGRATORE CHIMICO CLASSE 5** **CHEMICAL INTEGRATOR TYPE 5**

L'integratore chimico Sogeva classe 5 può essere utilizzato ad ogni carico in autoclave per monitorare il tempo, la temperatura e le condizioni di esposizione al vapore e fornisce un controllo necessario alla sterilizzazione. L'integratore classe 5 imita le funzioni dell'indicatore biologico in tre diversi punti durante il processo di sterilizzazione perché monitora il tempo e la temperatura senza bisogno dell'incubatore a confronto dell'indicatore biologico.

Sogeva Class 5 Chemical Integrators can be used inside each load to monitor time, temperature and steam exposure conditions and can provide the necessary sterilization assurance. Class 5 integrator mimics the ability of a biological indicator at three separate points during the sterilization process because it will monitor both time and temperature without requiring incubation as does a biological indicator.



CONFEZIONAMENTO PACKAGING

250 striscette in una confezione
250 strips in one box



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

ISO 11140-1 type 5

INDICATORE EMULATORE DI **STERILIZZAZIONE CLASSE 6** **EMULATING INDICATOR STRIPS** **TYPE 6**

I nostri emulatori sequenziali SOGEVA di tipo 6 verificano i processi di sterilizzazione per accertare una sufficiente esposizione al vapore (vapore, temperatura e tempo) all'interno dei tray o in altri punti selezionati. Solo in caso di conformità a tutti i parametri si verifica il corretto viraggio del colore.

Our SOGEVA emulating indicators Type 6 check your sterilisation processes for sufficient steam exposure (steam, temperature and time) in the interior of trays or other selected locations. Only upon compliance with all parameters a correct colour change does appear.



CONFEZIONAMENTO PACKAGING

500 striscette in una confezione
500 strips in one box



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

ISO 11140-1 type 6



NASTRI INDICATORI AUTOCLAVE TAPES

I nastri indicatori permettono di valutare il corretto ciclo di sterilizzazione. Resistenti alle alte temperature ed all'umidità, sono dotati di elevata adesione sui vari tipi di teli, metalli, plastiche, non woven e carte; l'elevata conformabilità consente un facile utilizzo manuale.

- **STERILIZZAZIONE A VAPORE** - il viraggio cambia da verde chiaro a verde medio/scuro
- **STERILIZZAZIONE A SECCO** - il viraggio cambia da verde a marrone
- **STERILIZZAZIONE EO** - il viraggio cambia da giallo chiaro a verde scuro/blu

Privi di piombo o cobalto

The indicator tapes allow the correct sterilization cycle to be assessed. Resistant to high temperatures and humidity, they have high adhesion to various types of cloth, metals, plastics, non-wovens and papers; the high conformability allows easy manual handling.

- **STEAM STERILIZATION** - indicator changes from light green to medium/dark green
- **DRY STERILIZATION** - indicator changes from green to brown
- **EO STERILIZATION** - indicator changes from light yellow to dark green/blue

Lead and cobalt free



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

Conforme alle norme ISO 11140-1:2015 tipo 1 E1
(Indicatore di processo)
Conforming to norm ISO 11140-1:2015 type 1 E1
(Process indicator)



CONFEZIONAMENTO PACKAGING

- **Sterilizzazione a vapore** - Steam sterilization
12x50 mt | 72 pcs/carton
19x50 mt | 48 pcs/carton
25x50 mt | 36 pcs/carton
- **Sterilizzazione a secco** - Dry sterilization
19x50 mt | 48 pcs/carton
- **Sterilizzazione ETO** - ETO sterilization
19x50 mt | 48 pcs/carton



PERSONALIZZABILE CUSTOMIZABLE

In base alla richiesta del cliente
According to the customer's request